


L'apparecchio è un dispositivo medico. Esso può essere utilizzato solo dopo lo studio della documentazione del produttore e nel rispetto rigoroso delle norme operative, delle misure di sicurezza, e anche nel rispetto delle regole di uso clinico indicate in questo manuale.

Particolare attenzione deve essere prestata alle controindicazioni durante l'uso degli apparecchi. L'uso necessita di prescrizione medica

AK TOM® LCD



AK TOM® “mini”

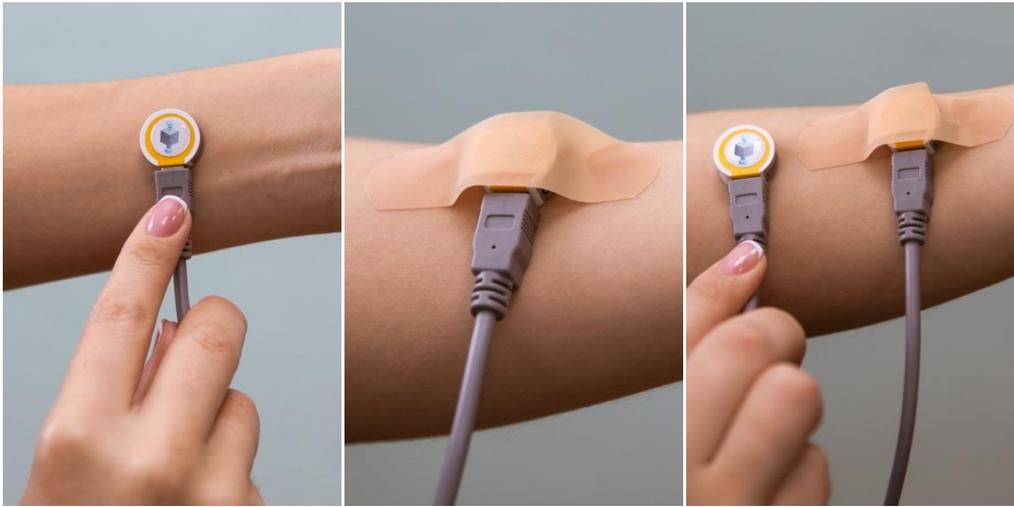

Dispositivo per la terapia MMV - EHF

Da 30 anni la terapia **MMW - EHF** è stata studiata in Russia sulla base di centinaia di indagini e migliaia di riferimenti. La terapia **MMW - EHF**

opera su una base naturale, con risultati molto efficaci e senza effetti collaterali segnalati. Rimuove i sintomi e ripristina organi e strutture del sistema - un prerequisito per un risultato duraturo del trattamento. Nel 2000 scienziati russi e ricercatori per l'impiego della terapia **MMV - EHF** nei campi della biologia e della medicina, hanno ricevuto il premio di stato più prestigioso in Russia (Equivalente al premio Nobel nel mondo occidentale).

MMW - EHF (MilliMeterWave – ExtremeHighFrequency)

Le onde **MMW - EHF** sono il linguaggio che le nostre cellule usano per l'interazione. Ogni cella è attiva e vibra su una certa frequenza. Tali vibrazioni creano movimenti ondulatori. E' dimostrato che ogni struttura del mondo è permeato da questi "mini" vibrazioni, che permettono di comprendere l'esistente e il futuro e lo sviluppo del corpo. Secondo i modelli della meccanica quantistica, ogni oggetto ha un doppio carattere, è materia e energia elettromagnetica, dove tutto vibra e ogni cellula è una parte di un contesto che si sovrappone.

Onde millimetriche (= onde radio) hanno frequenze comprese tra 42,3 e 100 GHz (gigahertz). Le membrane delle nostre cellule vibrano e comunicano tra loro con queste onde. Gli squilibri in queste onde creano problemi di salute. Il dispositivo **AK TOM®** genera onde millimetriche con la stessa forza di quelle generate dal corpo, 10mw alla potenza di -10 al cm quadrato, che è un miliardo di volte inferiore alla radiazione da un telefono cellulare.

INTRODUZIONE

E' noto che il corpo è costituito da cellule e che ogni cellula agisce come una fabbrica che riceve nutrimento e ossigeno e dispone di prodotti di scarto. Questo avviene attraverso le membrane delle cellule. La forza fisiologicamente sana della membrana è fra 60 e 90 mV (millivolt). Se la forza è inferiore o superiore, la cellula diminuisce le sue funzioni. Il dispositivo **AK TOM®** irradia onde della stessa ampiezza e potenza della vibrazione delle membrane delle cellule sane. Quando la frequenza entra in contatto con il corpo, si crea una risonanza che rafforza le vibrazioni della cellula. In questo modo le vibrazioni normalizzano il potenziale di membrana della cellula. Il livello di energia cellulare è mantenuto costante con l'aiuto delle vibrazioni generate dalle onde millimetriche generate da **AK TOM®**.

Quando queste frequenze cambiano, la carica aumenta e di conseguenza le funzioni delle cellule. Questo è il primo effetto dell'influenza delle onde millimetriche irradiate dal **AK TOM®**

Un secondo effetto è legato ai recettori. Ogni cellula possiede recettori che ricevono informazioni dall'esterno. Se i recettori hanno una ridotta sensibilità agli ormoni e alle sostanze segnale, le cellule sono meno efficienti.

Un recettore può essere più o meno attivo. Le onde millimetriche attivano i recettori in modo che diventino più sensibili e ricevano informazioni in modo più efficiente.

Il terzo effetto delle onde millimetriche è il miglioramento della comunicazione delle cellule. Il numero di cellule che costituisce il corpo umano è 10 alla potenza di 16.

Per avere una funzione corretta di un sistema complicato senza disturbi, è necessario un meccanismo sicuro per sincronizzare le funzioni del corpo. **AK TOM®** modula le frequenze del corpo all'interno della zona che viene trattata e agisce come un meccanismo di sincronizzazione. Si ripristina il "ritmo sano" del corpo che è stato perso durante la malattia. In questo modo protegge il sistema interno per il flusso di informazioni del corpo.

Uno degli effetti più importanti delle onde millimetriche di **AK TOM®** è la diluizione del sangue. Questo è di grande importanza soprattutto per gli anziani. Le vibrazioni delle onde millimetriche generate dal **AK TOM®** vengono diffuse in tutto il corpo dai liquidi extracellulari, i recettori della pelle e meridiani energetici, che attraverso la risonanza ripristinano le vibrazioni delle membrane. Questo migliora le funzioni delle cellule e le loro comunicazioni.

Effetti della terapia ad onde millimetriche con AK TOM®

I test condotti in Russia mostrano che, "indipendentemente dal tipo" della malattia, le onde millimetriche normalizzano i parametri del sistema immunitario, aumentano la microcircolazione, equilibrano il metabolismo del corpo, ritardano l'invecchiamento e prolungano la vita, prevengono lo sviluppo di malattie e impediscono alle malattie acute di diventare croniche, riducono il rischio di malattie oncologiche, aumentano l'efficienza dei farmaci e riducono la loro tossicità e gli effetti collaterali, abbreviano i tempi di trattamento e migliorano lo stato di salute per il paziente che soffre di infarti cardiaci e ictus, accelerano la guarigione delle fratture 2,5 / 3 volte e, in aggiunta, hanno un effetto antidolorifico. Con l'irradiazione delle onde millimetriche i recettori delle cellule diventano più sensibili agli ormoni ed enzimi, e migliorano anche l'efficacia dei trattamenti cosmetici per migliorare la pelle e ridurre le rughe. La pelle diventa meno umida con l'età, ma rafforzando la membrana cellulare e migliorando la circolazione sanguigna il vigore può essere ripristinato.

Test Clinici

Gli strumenti per la terapia ad onde millimetriche **AK TOM®** sono stati sottoposti a test clinici per più di 8 anni presso i principali ospedali russi. Proprio in Russia l'efficacia clinica è stata studiata su **20.680** pazienti durante il 1993-2000. Il **96,94%** dei pazienti trattati ha mostrato risultati positivi (recupero - grande miglioramento, miglioramento). Non si è avuto effetto terapeutico per solo il **3,06%** dei pazienti. Gli strumenti **AK TOM®** sono raccomandati e certificati per l'uso da parte del Ministero della Sanità Medica della Federazione Russa. I metodi di trattamento sono ratificati dalla stessa autorità.

TIPO DI MALATTIA	RECUPERO TOTALE %	MIGLIORAMENTO %	NESSUN EFFETTO %
CARDIOVASCOLARE	36,1	61,2	2,7
LOCOMOTORE	25,7	72,7	1,6
GASTROENTOROLOGIA	73,4	24,1	2,5
PNEUMOLOGIA	37,7	53,4	8,9
SISTEMA NERVOSO	66,4	33,2	0,4
OTORINOLARINGOIATRIA	69,4	30,6	-
DERMATOLOGIA	42,4	54,6	3,0
CHIRURGIA (FERITE) FRATTURE	93,1	6,9	-

SSTEMI MUSCOLARI E GIUNTURE	27,3	63,6	9,1
UROLOGIA E ORGANI SESSUALI	14,7	85,7	-
TOTALE	44,5	51,9	3,6

NESSUN CASO DI PEGGIORAMENTO

L'influenza delle irradiazioni con il **AK TOM®** sulle membrane delle cellule del sangue è stato oggetto di studi approfonditi. Un miglioramento della struttura del sangue è stato indicato, il contenuto aumento dei linfociti in generale e dei linfociti T (Fattori importanti nella protezione del sistema immunitario), in particolare, e un aumento di antiossidanti e sostanze biologicamente attive. **AK TOM®** normalizza importanti indicatori della coagulazione del sangue in infarto spasmo vascolare del cuore e malattie vascolari, tra di loro. Inoltre, stimola la formazione del sangue, che è la ragione per il suo utilizzo nel trattamento di pazienti oncologici. **AK TOM®** influenza anche il riempimento dei vasi sanguigni, la dinamica del flusso linfatico e il trasporto di varie sostanze e gas.

L'utilizzo della terapia classica di onde millimetriche dipende da tutti i sistemi del corpo, come il sangue, sistema linfatico, ecc. avendo frequenze di risonanza entro l'intervallo di MMV. Studi approfonditi sono stati condotti su l'emoglobina del sangue e sul livello di risonanza magnetica del nucleo.

L'emoglobina è attivata a 42,194 GHz, l'irradiazione con il **AK TOM®** a questi parametri aumenta la capacità dei globuli rossi di trasmettere l'ossigeno fino a tre volte. Questo accelera la guarigione dei tessuti danneggiati e la disintossicazione del corpo. Pertanto, il trattamento con questa frequenza ha una funzione comune in una serie di processi patologici. Grazie a questo effetto, questo metodo è più efficace nel trattamento di aree e zone con abbondante flusso di sangue, come le arterie e vene.

Uno dei meccanismi più importanti è l'attivazione delle endorfine - gli ormoni della gioia. Essa influenza positivamente la sindrome da dolore, la ricostruzione dei tessuti, i toni dei vasi e la microcircolazione. MT ha un effetto chiaramente stimolante sul sistema immunitario.

L'attivazione del sistema antiossidante del corpo, che si svolge con la MT, blocca i processi di ossidazione dei lipidi, che svolge un ruolo nella comparsa di alcune malattie e il loro deterioramento. MT ha dimostrato di essere insostituibile per la riabilitazione dopo l'infarto cardiaco e ictus, e - più importante - per la prevenzione di queste malattie.

La dimostrazione, in molti anni di ricerca ed uso clinico dell'alta efficienza, della possibilità della riduzione dell'uso e della quantità dei farmaci e l'assenza di effetti collaterali, significa che **AK TOM®** può essere raccomandato per il trattamento in una vasta gamma di applicazioni e la sua utilità nella prevenzione di diverse malattie.

Le metodologie di applicazione delle terapie sono elaborate in base agli studi di ricerca e clinicamente confermate da indagini nel corso degli anni negli ospedali russi e le istituzioni. Il **AK TOM®** è stato sottoposto a numerosi test clinici prima che fosse approvato e certificato dal Ministero della Salute in Russia. Il **AK TOM®** è attualmente impiegato da personale medico, veterinari e biologi in Russia e in altri paesi. Il cristallo di risonanza, che è il cuore della tecnologia, è stato inventato dal professor ALEXANDER M. KOZHEMYAKIN

Questo cristallo può essere utilizzato in aree di frequenza diverse. Questi cristalli sono in grado di registrare informazioni da tutti gli oggetti possibili biologici e mantenimento di dette informazioni senza limiti di tempo.

TECNOLOGIA DEL CONTROLLO DELL'ENERGIA DELLA MATERIA "AK TOM®"

Il dispositivo **AK TOM®** con la terapia **MMW - EHF**, con il suo cristallo semiconduttore (arseniuro di gallio) funziona come un disco rigido di un computer. **AK TOM®** ha tre forme eccezionali di terapia. La prima è una funzione unica, basata sulla BRR-terapia (Background Resonance Radiation- Memoria della radiazione di sfondo risonante). Il cristallo è in grado di memorizzare informazioni provenienti da esseri umani, piante, cibo o altri oggetti. Quando la memorizzazione è completata il cristallo comincia a riflettere le informazioni registrate verso il corpo, l'acqua o qualunque altro oggetto sotto forma di onde radio molto deboli. Durante questo processo, le funzioni di batteri e microrganismi sono oppressi, e muoiono in breve tempo. In questo modo, si crea una componente elettromagnetica di resistenza utilizzando la potenza del corpo, che completa l'immunità delle vaccinazioni. Anche le cellule sane rispondono alle onde radio, ma a causa del loro gran numero questa influenza è insignificante rispetto agli effetti sui microrganismi patogeni che eliminati. Per le cellule sane non è altro che una stimolazione sana. Il BRR-terapia agisce, quindi come l'omeopatia elettronica, come terapia partendo dal presupposto che influenza il simile e funzionando secondo lo stesso principio. Il vantaggio con la BRR-terapia è che le informazioni vengono raccolte direttamente dal corpo e, quindi, il

rischio di "dose" e "rimedio" errato è escluso. *Le informazioni possono inoltre essere recepite e memorizzate da escrementi vari del corpo: saliva, urina, lacrime e perfino di feci (tutto ciò che è registrato sul cristallo può essere trasferito ad acqua potabile, l'acqua ha la capacità di ricevere e memorizzare le informazioni e bere l'acqua ottiene un ulteriore effetto omeopatico o in altri ausili o materiali con memoria elettromagnetica).*

La seconda funzione è la disintossicazione di organi, che è notevolmente più efficiente rispetto ad altre metodi medici di trattamento.

La terza funzione è il trattamento con radiazioni specifiche per la riabilitazione da malattie e di prevenzione.

La combinazione della terapia ad onde millimetriche e BRR-terapia del dispositivo **AK TOM®** offre possibilità uniche alle persone di migliorare la loro salute e prevenire le malattie in modo naturale.

Le diverse applicazioni sono molte e le aree di utilizzo sono in linea di principio illimitata.

Uno dei maggiori vantaggi derivanti dall'utilizzo del **AK TOM®** è la sua capacità di eliminare i parassiti, batteri, virus e infezioni.

Attraverso la bio risonanza la patologia viene distrutta e le normali funzioni sane delle cellule del corpo vengono ripristinate. Persino un resistentissimo virus come HPV Borelli è eliminato con l'aiuto del dispositivo. Febbri e infiammazioni sono eliminate entro 3-4 giorni. E' difficile trovare una terapia più efficace per il trattamento di infezioni e parassiti.

E' possibile alleviare il dolore quasi subito. E' noto che le frequenze magnetiche nelle cellule danneggiate vengono modificati quando il dolore è vicino. Il cristallo legge e memorizza questo cambiamento e lo riflette. Questo ripristina l'irradiazione armonica delle cellule. Utilizzando una corretta terapia di risonanza i recettori nervosi non ricevono alcuna informazione patologica e il dolore viene eliminato. Questo nel 90-95% di tutti i trattamenti. Il dolore acuto deve essere trattato per primo, con la modalità di BRR terapia.

AK TOM® LCD e AK TOM® “mini”

modalità d'uso

AK TOM® LCD è composto di una unità centrale di comando a cui possono essere collegati, attraverso delle porte USB uno o due diodi oscillatori da posizionare sulle Zone Biologicamente Attive, sui Punti Biologicamente Attivi del corpo o sulla zona dolorosa da trattare, o per chi pratica agopuntura, sui punti di agopuntura.

*Dispone di 10 programmi terapeutici indicati per i diversi disturbi e di un programma in modalità **BRR**.*


- Modalità EHF universale
- modalità BRR
- problemi, che si basano su fattori di stress - disturbi nevrotici con problemi di pressione sanguigna, distonia vascolare, e altri.
- malattie ORL - tonsilliti, faringiti, laringiti, e altri.
- malattie del sistema cardiovascolare - sindrome stenocardicheskie, malattia coronarica, ipotensione e ipertensione, malattie dei vasi sanguigni e altri.
- malattie del sistema polmonare - tracheiti, bronchiti, asma bronchiale e altri.
- malattie endocrine - diabete, problemi alla tiroide, e le malattie gastrointestinali - pancreas, del fegato e della cistifellea, stomaco e duodeno, intestino, ecc
- malattie delle ossa - osteocondrosi, artrosi, artrite, lesioni e altre conseguenze.
- malattie del sistema genito-urinario - rene, vescica, prostata, utero, ovaie,
- malattie della pelle - dermatite allergica ed altri.
- viene utilizzato con BAT (punti di agopuntura)

AK TOM® “mini” dispone di un diodo oscillatore interno all'unità e di un diodo oscillatore e una porta USB per il collegamento di un altro diodo oscillatore.

*Dispone di 2 programmi specifici e della modalità **BRR***

- Modalità UHF versatile 5 minuti
- modalità BRR
- Universale EHF modalità 10 minuti

Il manuale di raccomandazioni metodiche, in lingua italiana, suggerisce la scelta del programma e della ZBA e della durata dei cicli di trattamento. Il terapeuta esperto può scegliere modalità diverse.

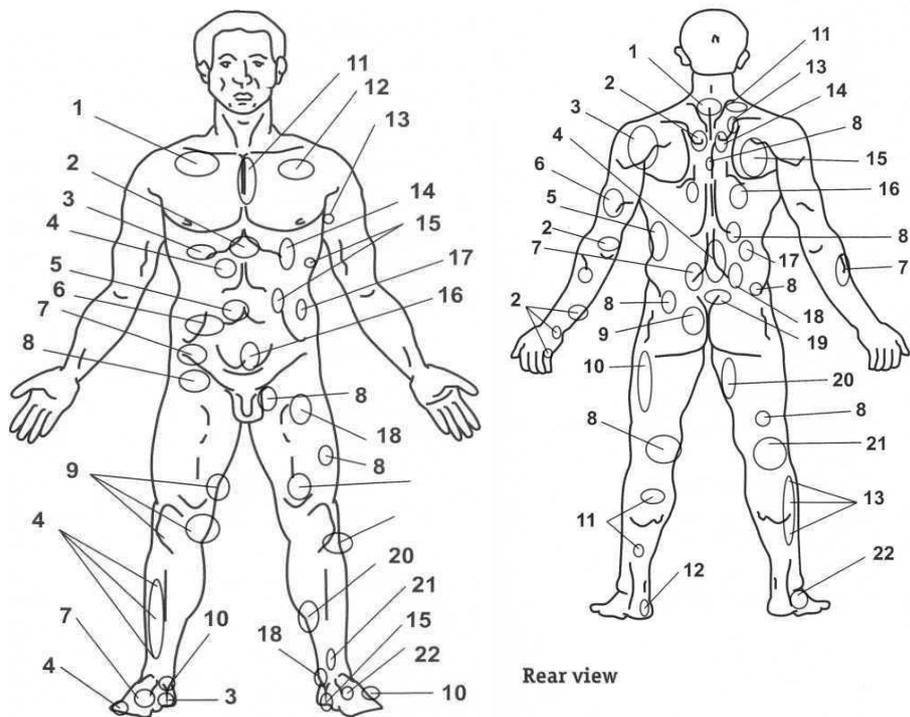

ZONE BIOLOGICAMENTE ATTIVE

TRATTAMENTI Indicazioni terapeutiche sulle basi degli studi clinici

Neuropatologia

1. Le manifestazioni neurologiche di osteocondrosi spinale, incluse radicolopatie discogene

Espresso effetto anestetico e antalgico, aumento della soglia del dolore nelle zone di sensibilità locale

2. scoliosi spinale per bambini

Espresso effetto anestetico, aumento della tolleranza ai carichi fisici, crescita della mobilità spinale

3. insufficienza vertebrale

Scomparsa o riduzione importante di mal di testa e vertigini, normalizzazione della pressione arteriosa

4. Traumi cerebrali esogeni - organici (traumatico, vascolare, genesi infettiva tossica complessa)

Scomparsa dei segni di astenia, labilità emotiva, iperestesia, mal di testa, vertigini, oscillazioni di pressione arteriosa, restauro del sonno notturno

5. Arteriosclerosi cerebrale

Normalizzazione della circolazione sanguigna cerebrale, normalizzazione degli indici di scambio dei lipidi

6. Mal di testa

Significativa riduzione dell'intensità e della lunghezza degli attacchi

8. Sindrome di distonia vegetativa, tra cui le crisi vegetative (attacchi di panico) Normalizzazione dello status vegetativo, riduzione o scomparsa mal di testa, miglioramento della gemo dinamica secondo dati della reografia

9. Nevrosi reattiva e stress-reazione, trattamento e profilassi

Riduzione o scomparsa di irritazione, labilità emotiva, disturbi del sonno, miglioramento della capacità di lavoro, miglioramento dell'umore

10. Paralisi cerebrali infantili

Riduzione del tono muscolare, crescita dei movimenti attivi

11. Epilessia, comprese le farmaco resistenti

Riduzione della quantità di attacchi e dinamica positiva di EEG-view

Malattie delle giunture

12. Malattie degenerative distrofiche delle articolazioni (osteoartrite deformante, malattia di Perthes ', osteo artropatia psoriaca)

Effetto anti-infiammatorio, crescita della forza muscolare, aumento della quantità di movimenti e della tolleranza ai carichi fisici

13. Emartrosi e artropatie emofiliache

Effetto anestetico, normalizzazione dell'omeostasi

14. Artrite reumatoide

Significativa riduzione del dolore e della rigidità mattutina, effetto immuno modulante

Patologie chirurgiche

15. Traumi e traumi postoperatori di pelle, tessuti molli ed ossei, anche complicati da processi purulenti e flaccidità rigenerante

Diminuzione di tutte le fasi del processo di ferimento, effetto anti-infiammatorio, stimolazione della rigenerazione, tra cui tessuto osseo, profilattica di suppurazione, espresso effetto anestetico, riduzione della dose di farmaci anestetici

16. Burns

Effetto anestetico, generazione rapida di tessuto granuloso ed epitelizzazione

17. Post-traumatico da osteomielite

Diminuzione del periodo della fase essudativa di infiammazione e di inizio della stimolazione di processi riparativi, normalizzazione delle caratteristiche cito morfologiche dei leucociti

18. Post trauma da contratture

Effetto anestetico, normalizzazione del microcircolo e disturbi trofici, ripristino di normali movimenti

19. Coliciste acuta effetto anti-infiammatorio

20. Pancreatite acuta diminuzione del periodo del trattamento, influenza positiva sulla condizione del sistema immunitario

Gastroenterologia

21. ulcera gastrica e ulcera duodenale, anche complicate da emorragia, perforazione o penetrazione

Riduzione del periodo di epitelizzazione da ulcere, riduzione delle recidive

22. Insufficienza funzionale dei condotti biliari

Rapida ed efficace diminuzione del dolore e dei sintomi dispeptici di coppedtazione, riduzione dei sintomi di coagulazione e cristallizzazione del fiele, normalizzazione della funzione contrattile della vescica biliare

23. Gastroduodenite cronica, compresa la presenza di infezione da Helicobacter Piloni

Rapida ed efficace diminuzione del dolore e dei sintomi dispeptici e cupping

24. Pancreatite cronica

Efficace riduzione del dolore, ripristino della funzionalità del pancreas

Ostetricia e ginecologia

25. Infiammazione cronica di annessi dell'utero, inclusi i casi di disfunzioni riproduttive

Effetto anestetico, aumento dell'elasticità dei tessuti, ripristino della funzione riproduttiva

26. Aborto spontaneo in gravidanza

Crescita del termine di fase luteale del ciclo mestruale, aumento dei livelli di estradiolo e progesterone, eliminazione della necessità di ormonoterapia

27. Complicazioni post aborto

Effetto di immuno modellazione, riduzione delle complicanze infiammatorie

Dermatologia

28. Psoriasi

Anti-infiammatorio, anodizzazione, effetto rigenerativo, risoluzione infiltrati, diminuzione del periodo del trattamento, riduzione delle recidive

29. Ulcere trofiche

Anti-infiammatorio, anodizzazione, effetto rigenerativo, diminuzione del periodo del trattamento, epitelizzazione delle ulcere.

30. Eczema atopico

Effetto anti-allergico, riduzione prurito

31. Eczema microbica

Accelerazione del processo di riparazione

32. Seborrea

Accelerazione del processo di riparazione

33. Neurodermatite

Riduzione del prurito

34. Vitiligine

Processo di restauro

35. Erpes

Espressa anodizzazione e effetti anti-infiammatori

36. Sifilide

Azione immuno correttiva, accelerazione del complesso di reazioni sierologiche.

Malattie infettive e parassitarie

37. Opisthorchiasis cronica

Miglioramento degli indici di funzione contrattile della vescica biliare e delle caratteristiche del volume del fiele di, eliminazione delle uova di opisthorchiasis dal fiele

38. Tubercolosi polmonare, anche in composizione con infezioni da clamidia e mycoplasmic

Stabilizzazione della tubercolosi in corso nei polmoni, riduzione della frequenza di complicanze postoperatorie, accelerazione dell'effetto di infiltrati, anti bacilli e veloce chiusura delle cavità

39. Zecche encefalite e borreliosi, zecche

Crescita di attività di circolazione, riduzione dei mal di testa e dell'intensità artralgica, normalizzazione del sonno, riduzione della durata della febbre, della debolezza e sudorazione, crescita didascalica di anticorpi per l'antigene del virus dell'encefalite da zecche e la borreliosi

40. Virus dell'epatite

Accelerazione della guarigione

41. Infezioni virali acute delle vie respiratorie - profilassi e trattamento riduzione della morbilità di 2 volte, malattia in una forma leggera, mancanza del periodo di malattia, l'assenza di complicazioni di infezioni respiratorie acute da virus

Cardiologia

42. Cardiopatia ischemica: angina tensione, angina instabile, infarto del miocardio, aritmie

Espresso effetto antianginoso, riduzione del numero di episodi di ischemia miocardica indolore, miglioramento della funzione diastolica del ventricolo sinistro, riduzione degli attacchi di angina, riduzione degli episodi di aritmia, riduzione della dose di nitroglicerina, normalizzazione del livello di attività di antitrombina III e deformabilità degli eritrociti

43. Ipertensione arteriosa, tra cui le crisi ipertensive

Effetto ipotensivo, riduzione delle resistenze periferiche dei vasi, miglioramento degli indici di circolazione di sangue arterioso cerebrale, riduzione o eliminazione dei segni di stasi venosa, normalizzazione della secrezione di catecolamine 44. Traumi non coronarici del miocardio (prolasso della valvola mitralica, cardiomiopatia, miocardite)

Riduzione di episodi cardiologici, di miglioramento della qualità della vita, normalizzazione degli indici sistema dell'emostasi

Pneumologia

45. Polmoniti

Aumento di efficienza e di riduzione dei periodi di trattamento, prevenzione

46. Asma bronchiale

Riduzione della tosse e dispnea, riduzione della necessità di inalazione di broncolitici, miglioramento delle funzioni di scarico bronchiale, riduzione dei rantoli, normalizzazione degli indici di funzione del respiro, effetto immunomodulante

47. Bronchite cronica non ostruttiva

Effetto anti-infiammatorio

48. La bronchite cronica ostruttiva

Arresto della sindrome di bronco ostruzione

49. Sarcoidosi dei linfonodi della trachea e polmoni

Normalizzazione degli indici di radiografici, immuno grams e della funzione del respiro esterno, riduzione della frequenza di recidive e acutizzazioni

Odontoiatria

50. Anodontia e applicazione protesi

Espresso effetto anti-infiammatorio

51. Paradontiti

Espresso effetto anti-infiammatorio, stimolazione della rigenerazione, normalizzazione della circolazione sanguigna locale

52. Gengivite

Espresso effetto anti-infiammatorio

Oncologia

53. Neoplasia maligna (cancro del colon e del retto, melanoma della pelle, cancro allo stomaco, tumore della mammella, cancro del polmone, cancro ovarico, ENT organi, ecc)

Riduzione della quantità di complicazioni e di espressione, dopo poli-chemioterapia, riduzione delle recidive e numero metastasi, effetto anestetico

54. Linfomi (lymphogranulomathosis non Hodgkin)

Attivazione della protezione antiossidante dell'organismo, soppressione della ossidazione dei radicali liberi e normalizzazione del livello di citochine pro infiammatorie

55. Tumore benigno al seno

Prevenzione della transizione a maligno, effetto anti-infiammatorio

56. I tumori benigni dell'ovaio

Normalizzazione della secrezione del genere di ormoni e dello stato immunitario

57. Utero fibromioma

Riduzione delle dimensioni dei nodi

Endocrinologia

58. Gozzo esoftalmico tossico

Riduzione delle dimensioni della ghiandola tiroidea, il cambiamento consistente

59. Gozzo nodulare

Riduzione del gozzo e della dimensione nodi

60. Diabete mellito e le sue complicanze (micro-e macroangiopatia, epatosi, cataratta, nefropatia, cardiopatia)

Regressione delle complicanze, stabilizzazione del diabete attuale, riduzione della dose di insulina

Andrologia

61. Disturbi dell'andropausa

Intensificazione della libido, miglioramento della funzione sessuale

62. Iperplasia benigna della prostata

Intensificazione della libido, miglioramento della funzione sessuale

63. Prostatite cronica

Riduzione del dolore e della sindrome di diuresi, miglioramento della funzione sessuale

64. Secrezione tossica infeconda

Stimolazione della spermatogenesi

Malattie degli occhi

65. Retinopatia diabetica

Miglioramento degli indici di elettro oculo gramma, scomparsa delle sensazioni sgradevoli negli occhi

66. malattie infiammatorie oculari, tra cui genesi allergica Effetto anti-allergico, riduzione del prurito

67. Degenerazione della retina e malattie del nervo ottico

Miglioramento dell'acuità visiva, della diffusione visiva, della microcircolazione nella congiuntiva bulbare

Malattie del fegato

68. Cirrosi

Normalizzazione degli indici biochimici, delle dimensioni e della struttura del fegato

69. Epatite cronica

Normalizzazione degli indici biochimici, delle dimensioni e della struttura del fegato

70. Epatosi

Normalizzazione degli indici biochimici, delle dimensioni e della struttura del fegato

71. Intossicazione e traumi del fegato

Normalizzazione degli indici biochimici, delle dimensioni e della struttura del fegato

Malattie della circolazione del sangue

72. Aterosclerosi obliterante degli arti inferiori

Distruzione della sindrome del dolore, riduzione della claudicatio intermittens

73. Endoarterite obliterante

Distruzione di sindrome del dolore, riduzione della claudicatio intermittens

74. Malattia di Raynaud '

Miglioramento della circolazione periferica del sangue miglioramento del microcircolo

75. Sindrome post trombo flebitica

Distruzione della sindrome del dolore, accelerazione della riparazione delle ulcere trofiche

Narcologia

76. Alcolismo cronico

Riduzione della tensione interna, dell'ansia, del desiderio per l'alcol

77. Tossicomania

Influenza positiva sulla sfera psicologica, emotiva e somatica

9. Risultati di 6 anni di trattamenti con AK TOM® LCD (Dr. David Coen N.D., Ph.d,M.H., C.N.C – Brooklin NY)

1. *Ulcera e ulcere del duodeno*: guarigione dell'ulcera per il 98% dei casi, lo stato di buona salute nel corso di cinque anni dopo il trattamento per il 79%.

2. *Bronchite cronica e asma*: stato migliorato per 87%, buono stato di salute per due anni e più per il 68%.

3. *Complicazioni a causa del diabete di tipo 1*: Guarigione della cataratta per il 78%, guarigione di problemi renali per il 52%, guarigione del cuore e dei problemi dei vasi per il 58%. Il 13% dei bambini trattati con insulina riusciva a smettere l'assunzione di insulina (sotto il controllo di endocrinologi). Miglioramento delle loro condizioni di salute sono stati confermati da prove di laboratorio. L'89% scomparsa di complicazioni per la stabilizzazione dello stato di salute. Miglioramento generale della salute per il 96%, stabilità dei risultati per più di un anno per il 45%.

4. *Ipertonia*: stato stabile con una pressione sanguigna più bassa in relazione ad una minore assunzione di farmaci per l'82%, stabilizzazione dello stato per l'89%, ha continuato buono stato di salute per un anno o più per il 75%.

5. *Malattie di cuore e vasi*: Riduzione del numero dei periodi acuti per l'82%, riduzione di assunzione giornaliera di farmaco per il 94%, continua lo stato di salute per il 82%.

6. *Malattie del fegato* (cirrosi, epatiti, heptoses): miglioramento dei parametri biochimici della funzionalità epatica per l'82%, normalizzazione della

struttura degli organi (secondo esame di ultrasuoni e tomografia computerizzata) per il 58%, continua lo stato miglioratore per un anno o

più il 73%.

7. *Malattie del sistema riproduttivo femminile*: miglioramenti per l'83% ha continuato miglioramento dello stato per un anno o più per il 74%.

8. *Malattie del sistema di riproduzione maschile*: stato migliorato per il 72% ha continuato il miglioramento dello stato per un anno o più per il 68%.

9. *Malattie del movimento*: Miglioramento per l'86%, continua lo stato di salute migliore di un anno o più per il 72%.

10. *Allergie*: Riduzione dei sintomi per l'84%, ha continuato miglioramento dello stato per un anno o più per il 62%.

E 'necessario ripetere il trattamento due volte o più durante l'anno.

L'apparecchio è un dispositivo medico. Esso può essere utilizzato solo dopo lo studio della documentazione del produttore e nel rispetto rigoroso delle norme operative, delle misure di sicurezza, e anche nel rispetto delle regole di uso clinico indicate in questo questo manuale.

Particolare attenzione deve essere prestata alle controindicazioni durante l'uso degli apparecchi. L'uso necessita di prescrizione medica

GLOBAL MEDICAL QUANTUM srl
Viale Mezzetti 9 - 06034 Foligno tel.0742 359581
www.quantmed.it – www.globalmedicalquantum.it
info@quantmed.it